



## Prendre soin de son processeur

L'implant cochléaire est composé de divers éléments en deux parties indissociables :

- dans tous les cas, une partie interne, fixe, placée sous la peau derrière l'oreille, invisible, ne nécessitant pas d'entretien particulier qui comprend un aimant (1), une antenne réceptrice (2), un récepteur stimulateur (3) et un porte électrode (4) inséré dans la cochlée au niveau de l'oreille interne pour activer le nerf auditif

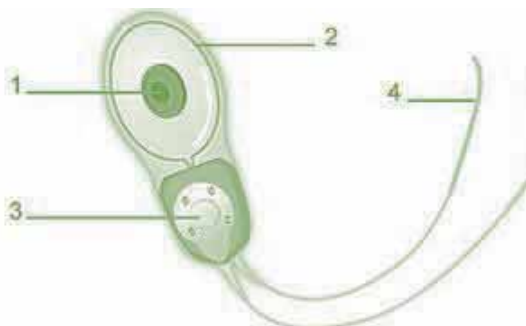

- et une partie externe amovible ou processeur assurant la captation des sons, portée en contour d'oreille qui est composée d'un microprocesseur récepteur avec microphones (1), fonctionne soit sur piles interchangeables, soit sur batteries rechargeables (2) et une antenne aimant (3) du type ci-dessous,

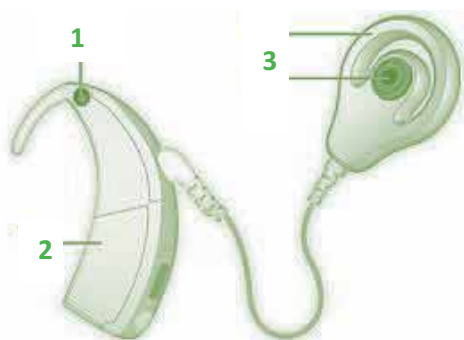

ou encore,  
- une partie externe amovible assurant la captation des sons, portée sur la tête, du type ci-dessous



Kanso



Rondo 2

### ATTENTION !

Votre processeur de son est fragile et couteux. Il nécessite d'être manipulé avec le plus grand soin et il est vivement conseillé de le faire assurer. Mais sachez que l'assurance ne couvre pas les mauvaises manipulations.

Sensible non seulement à l'eau, il faut le retirer pour aller sous la douche, mais également à la transpiration, à la poussière, à la pollution et il faut le nettoyer chaque jour avec un chiffon propre et doux.

Une fois par semaine utilisez une lingette humide.

En manipulant votre processeur ne tordez pas le câble antenne, s'il en est équipé, cela pourrait l'endommager.

Les contacts doivent rester propres et les microphones être protégés des impuretés qui pourraient s'accumuler et nuire à la qualité du son.

Les protections des microphones doivent être remplacées régulièrement pour en assurer un fonctionnement optimal. Vérifier dans la notice de votre appareil comment procéder pour les remplacer.

Lorsque vous retirez votre processeur, rangez-le dans la boîte prévue à cet effet. Pendant la nuit placez le processeur dans un dessiccateur.

Si vous faites du sport vous devez sécuriser votre processeur pour qu'il reste bien en place. De même si vous allez vous baigner - piscine ou grande bleue -, équipez-vous des protections prévues à cet effet.

Ces quelques précautions vous assureront un fonctionnement optimal de votre implant.

Pour mieux profiter de votre implant une gamme complète d'accessoires est à votre disposition, quel que soit le fabricant de votre implant

### En savoir plus :

<https://advancedbionics.com>

<https://www.cochlear.com>

<https://www.medel.com/fr>

<https://www.oticonmedical.com/fr>